

# T-Edge 10

**Eficiencia máxima.  
Costes mínimos.**



Desempeño de clase B


El Autoclave de esterilización totalmente automático  
Diseñado para consultorios de clínicas dentales y  
consultorios médicos pequeños

  
**Tuttinauer**  
Innovation · Legacy · Partnership

# Es un placer conocerle. Soy el nuevo T-Edge 10 y estaré a su lado a lo largo de todo el camino.

## Esterilización con el clic de un botón

Basta seleccionar el programa adecuado y presionar "iniciar".  
Yo me haré cargo de todo lo demás. Me gusta llamar a esto "Clic y listo".

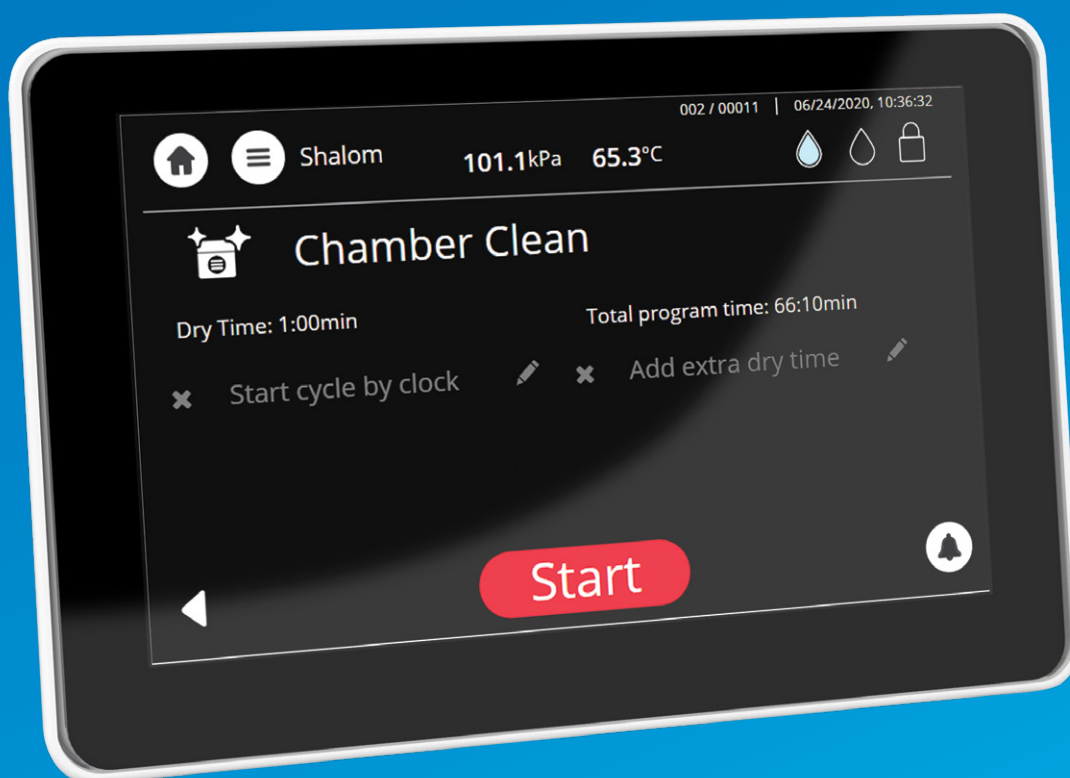

El Autoclave de esterilización totalmente  
automático de principio a fin

# Mucho más que un simple Autoclave

Sus capacidades son necesarias en la clínica y su tiempo es fundamental.  
Es por ello que quiero liberarlo.

- ◆ Cumplimiento de las estrictas normas internacionales
- ◆ Funcionalidades de esterilización clínicamente probadas
- ◆ Panel táctil de alta resolución
- ◆ Innovadora tecnología original
- ◆ Interfaz de fácil utilización
- ◆ Diseño elegante
- ◆ Excelente experiencia del usuario



¡Permítame cuidar del proceso de esterilización  
mientras Ud. cuida de sus pacientes!

# Eficiencia máxima. Costes mínimos.



## Aproveche al máximo su tiempo con los pacientes

- Clic y listo
- Tiempos de ciclo cortos
- Capacidades de monitoreo remoto\*\*
- Proceso de esterilización confiable



## Mejore la seguridad de sus pacientes

- Múltiples opciones de seguimiento
- Ciclos de prueba preprogramados
- Proteja la reputación de su clínica
- Cumplimiento de las estrictas normas de seguridad



## Minimice sus costes operacionales

- Innovador autoclave económico
- Ciclo de vida extendido
- Costes de mantenimiento reducidos
- Costes operacionales diarios y semanales reducidos

Aumente la satisfacción y la lealtad de sus pacientes reduciendo el tiempo y el esfuerzo necesarios para el proceso de esterilización



# Soy tan compacto y elegante, puede colocarme en cualquier lugar.



- Excelente capacidad de la cámara (más de 75%), con 5 bandejas extra largas\*
- Carga fácil y confortable con una abertura de la puerta en 110°
- Métodos ordenados de llenado y vaciado de agua, aún si el autoclave es colocado en el interior de un armario (superior, frontal o automático)
- Tiempo de ciclo rápido, incluyendo la esterilización y el secado completo
- Rango de programas automáticos con un botón, incluyendo programas de prueba
- Panel táctil de fácil utilización y panel de control para presentación de programas, tiempos de ciclo, niveles de agua y mucho más
- Documentación, opciones de seguimiento y código de barras avanzados
- Monitoreo Wi-Fi remoto a través de smartphone o tableta\*\*



## T-Edge 10

Tan sencillo como utilizar su smartphone

\* Los modelos exactos de la bandeja serán indicados con la mayor brevedad posible

\*\*Capacidades de monitoreo remoto estarán disponibles en un futuro cercano. La actualización gratis será ofrecida de acuerdo con los términos de la empresa.

# Mi mayor capacidad de cámara y tiempo de ciclo reducido **representan costes minimizados para su clínica**


## Excelente capacidad de la cámara

- 5 bandejas extra largas para cargas envueltas / no envueltas\*
- 3 casetes dentales completos + 3 casetes dentales de cuartos
- Más de 75% de capacidad de la cámara



## Servicio mejorado

- Facilidad de servicio
- Mantenimiento sencilla
- Mayor vida útil del producto

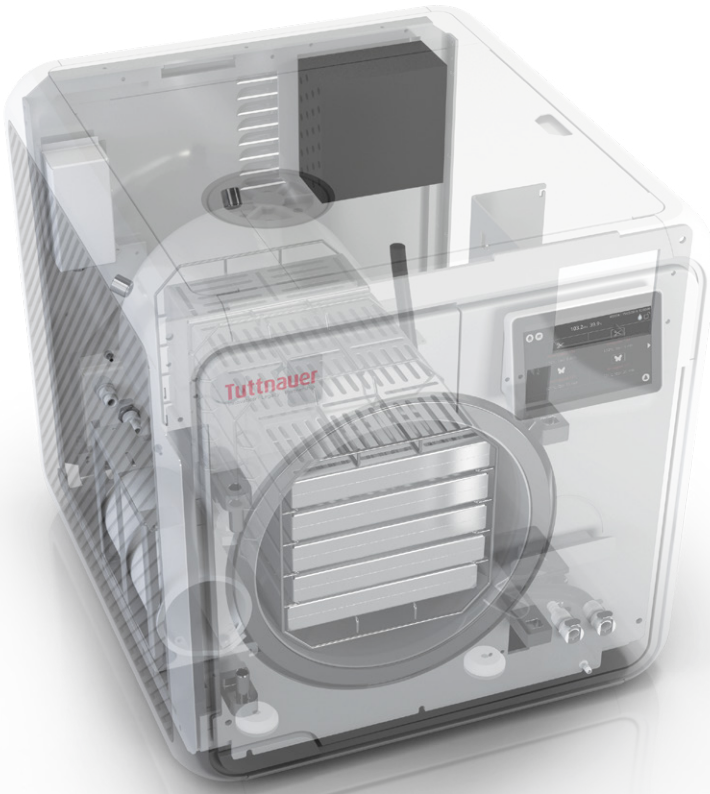

## Ecológico

- Consumo de agua reducido en cerca de 40%
- Consumo de energía reducido gracias al tiempo de ciclo reducido
- Menores costes de electricidad con configuraciones con retardo de tiempo para que la máquina funcione en horas de menor consumo



## Monitoreo en tiempo real

Proceso de T-Edge 10 por medio de smartphone




**Máxima esterilización.  
Costes mínimos.**






1. Coloque la bolsa en la cámara.

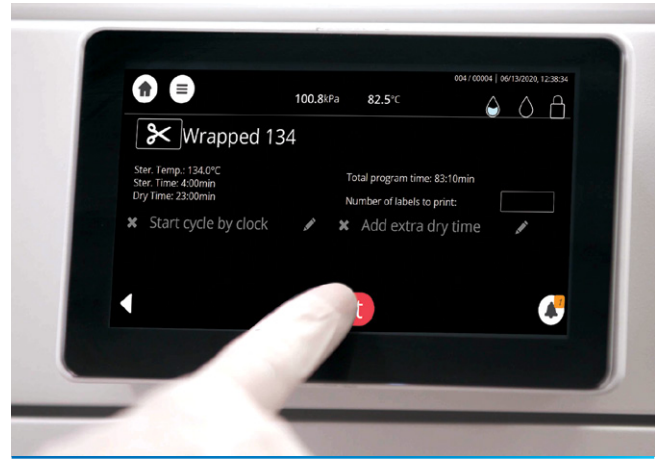

2. Proceso de esterilización completo.



3. Reciba códigos de barras con datos de esterilización (incluyendo fecha de caducidad).

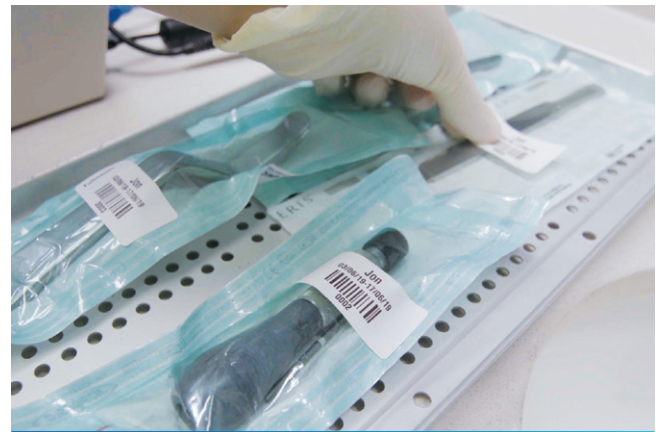

4. Aplique la etiqueta del código de barras en cada bolsa.







\* Escanee el código de barras para el archivo del paciente durante el tratamiento, para fines de seguridad y reglamentarios.



Proceso concluido



# Especificaciones técnicas

Icono	Programa de ciclo	Tipo de carga	Tiempo de ciclo (min)*	Tiempo de secado (min)
	No envueltos 134	Instrumentos no envueltos	21	1
	Envueltos 134	Instrumentos envueltos	25	15
	No envueltos 121	Instrumentos delicados no envueltos	32	1
	Envueltos 121	Instrumentos delicados envueltos	45	15

- \* Los tiempos de ciclo están basados en:  
 Cargas estándar de 1 kg (no incluyendo el secado)  
 Cámara caliente

	T-Edge 10
Tamaño de la cámara	46 cm de profundidad x 25 de diámetro
Volumen de la cámara	23 litros
Dimensiones (a x a x p)	48 cm x 50 cm x 58 cm
Peso	50 kg
Fuente de alimentación	50 / 60 hz
Consumo de potencia	2000 W
Conexiones	1 puerto Ethernet, 4 puertos USB, WI-FI, llenado de agua automático integrado y conexión de drenaje
Número de bandejas	5
Artículos suministrados	Tubo de drenaje, soporte de la bandeja

# Seguridad

## es mi segundo nombre

**Reglamentos de seguridad estrictos requieren que todos los procesos de esterilización sean documentados, archivados y guardados. T-Edge 10 ofrece un conjunto de métodos para documentar y guardar los ciclos de esterilización:**

- Memoria interna para guardar hasta 1000 ciclos de esterilización
- Impresión para guardar copias en papel
- Conexión Ethernet para transferencia de datos a su ordenador o red
- Puerto USB para transferencia de datos a su ordenador o red
- Capacidades sofisticadas de análisis de datos utilizando el software Tuttnauer RPCR

Ud. también puede configurar un nombre de usuario y contraseña personalizados para cada miembro del personal, para aumentar la seguridad, protección y seguimiento.

## Seguridad es el nombre clave

**T-Edge 10 cumple con las siguientes normas internacionales:**

### **Sistema de gestión de calidad:**

- ISO 13485
- Está conforme la Directiva para Dispositivos Médicos 93/42/EEC

### **Vía de certificación del recipiente de presión:**

- Código ASME sección I y sección VIII. Div.I, PED 2014/68/UE

### **Seguridad eléctrica:**

- EN/IEC 61010-2-40, IEC 61010-1

### **Compatibilidad electromagnética:**

- EN 61326-1

### **Pruebas funcionales de verificación y validación:**


- EN 13060, ANSI/AAMI ST55

### **Validación del software:**

- EN 62304, Directrices FDA

### **Pruebas de facilidad de uso (Experiencia del usuario, Ingeniería del factor humano):**

- IEC 62366-1

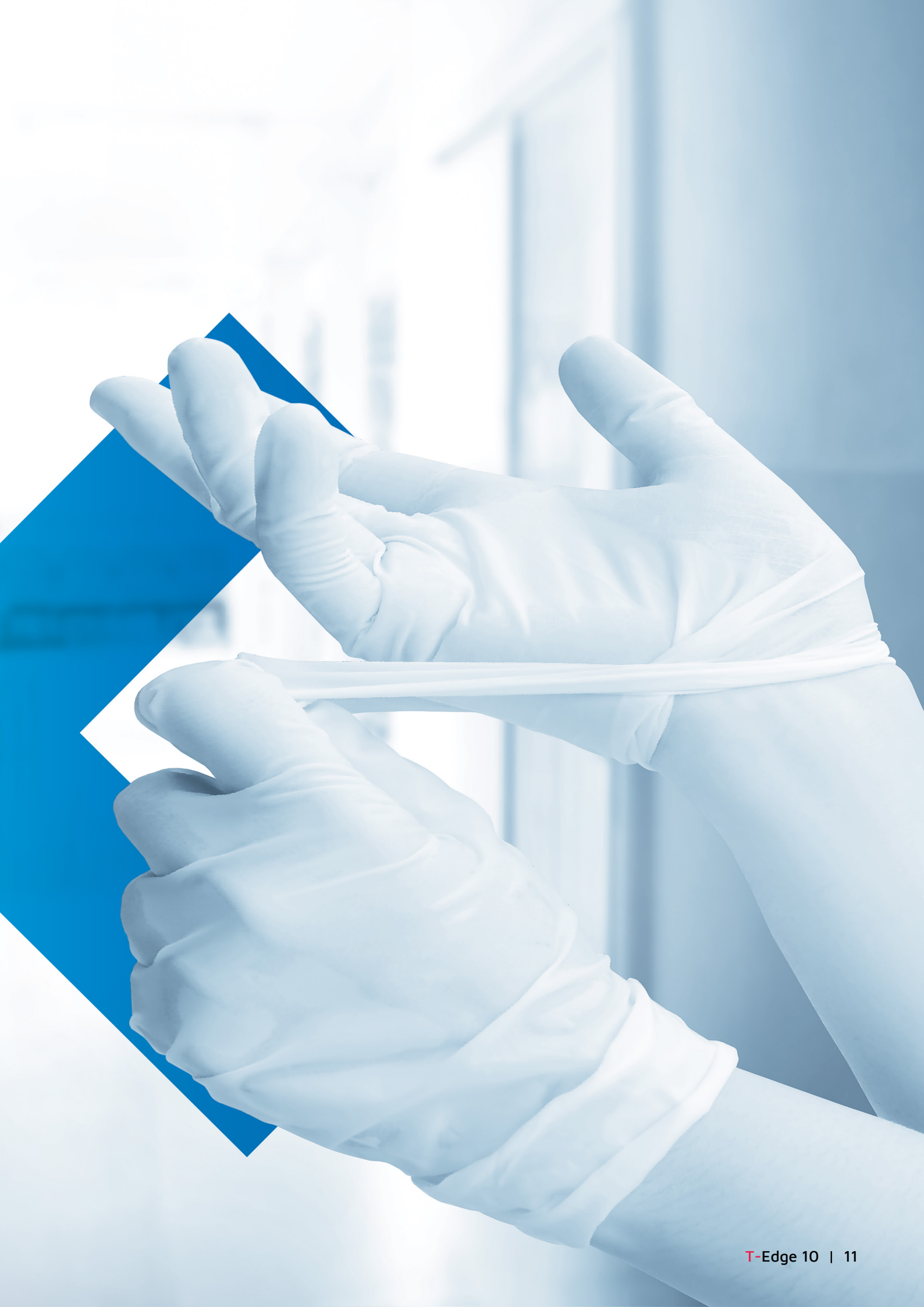



# Tuttnauer



Los líderes mundiales de renombre en soluciones de control de infecciones con más de

**90** años de experiencia

Productos distribuidos a clínicas, hospitales e instituciones de investigación en más de

**140** países

## TUTTNAUER, SU VENTANILLA ÚNICA PARA TODAS SUS NECESIDADES DE CONTROL DE INFECCIONES.

Permita que le presente nuestra familia complementaria de productos de esterilización para garantizar un proceso total de esterilización.



Máquina de sellado



Lavadora TIVA2



Destilador de agua



Limpiador ultrasónico



Limpieza de cámara

### Ventas y marketing internacional

Correo electrónico: [info@tuttnauer.com](mailto:info@tuttnauer.com)  
[www.tuttnauer.com](http://www.tuttnauer.com)

### Tuttnauer Europe b.v.

Hoeksteen 11, 4815 PR  
PO Box 7191, 4800 GD Breda  
Países Bajos  
Teléfono: +31 765 423 510  
Fax: +31 765 423 540  
Correo electrónico: [info@tuttnauer.nl](mailto:info@tuttnauer.nl)

### Tuttnauer USA Co.

25 Power Drive,  
Hauppauge, NY 11788  
Tel: +800 624 5836, +631 737 4850  
Fax: +631 737 0720  
Correo electrónico: [info@tuttnauerUSA.com](mailto:info@tuttnauerUSA.com)

Distribuido por:



Beneficiése del conocimiento de nuestros expertos

Únase a nuestro blog [tuttnauer.com/blog](http://tuttnauer.com/blog) 